



Mode d'emploi simplifié

FreeStyle
PAPILLON Vision
Système de surveillance de la glycémie



Le kit de démarrage comprend :

- Une trousse de rangement
- Un flacon de 10 électrodes FreeStyle Papillon Easy
- Un autopiqueur
- Un lecteur FreeStyle Papillon Vision
- + Un sachet de 10 lancettes FreeStyle Papillon



FreeStyle Papillon Vision compatible avec les électrodes FreeStyle Papillon Easy

Mesure de la glycémie



1

Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon et séchez-les. Insérez l'électrode FreeStyle Papillon Easy dans le sens indiqué sur la photo. Le lecteur se met en marche automatiquement.



2

Important : chaque fois que vous mettez votre lecteur en marche, un contrôle d'affichage bref et complet de l'écran apparaît. Examinez-le chaque fois qu'il s'affiche, en particulier avant de commencer l'analyse de la glycémie.



3


2 zones de prélèvement

Dès que l'écran ci-dessus s'affiche, vous pourrez appliquer l'échantillon de sang. En tenant le lecteur légèrement incliné, approchez le côté de l'électrode de l'échantillon de sang. Attention à n'utiliser qu'une seule zone de prélèvement par test.



4

Ne retirez pas l'électrode avant d'avoir entendu un bip ou vu cet écran affiché. Si la quantité de sang est insuffisante, vous pouvez ajouter du sang dans les 60 secondes.

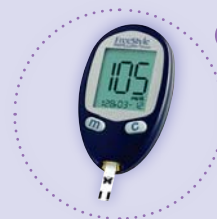

5

Le résultat de votre glycémie s'affiche en quelques secondes. Retirez l'électrode FreeStyle Papillon Easy. Le lecteur s'éteint automatiquement.

Lisez attentivement cette fiche car elle contient un mode d'emploi simplifié et des conseils et informations utiles.

Paramétrage du lecteur




Lecteur éteint, appuyez longuement sur le bouton **m** jusqu'à ce que SET apparaisse à l'écran.

Vous allez maintenant pouvoir régler les différents paramètres dans cet ordre (Alarmes journalières, Avertisseur sonore, Heure et format, Date et format). Le bouton **c** permet de modifier le paramètre, le bouton **m** de le valider et de passer au suivant. A tout moment, pour éteindre le lecteur, appuyez longuement sur **m**.

Accéder aux mémoires



Lecteur éteint, appuyez sur **m**. L'écran affiche la moyenne des 7 derniers jours.

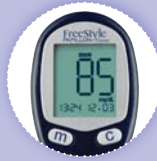

En appuyant successivement sur **c**, vous accédez aux moyennes des 14 puis des 30 derniers jours et enfin aux valeurs de glycémie horodatées, en commençant par la plus récente.

Qu'est ce que l'autosurveillance glycémique ?

Cela consiste à mesurer sa glycémie (taux de sucre dans le sang) à l'aide d'un lecteur de glycémie. C'est une technique simple et fiable. Le principe est de se piquer le bout du doigt ou un autre site* afin d'obtenir une petite goutte de sang, et de la déposer sur l'électrode déjà insérée dans le lecteur.

*Demandez toujours conseil à votre médecin.

L'autosurveillance glycémique est indiquée ⁽¹⁾ :

Chez les patients diabétiques de type 1 :
au moins 4 fois par jour.

Chez les patients diabétiques de type 2 :

Sous insuline : 2 à 4 fois par jour (au moins 4 fois par jour si insulinothérapie identique à celle d'un diabète de type 1).

Sous antidiabétiques oraux ou si l'objectif glycémique n'est pas atteint : 2 fois par semaine à 2 fois par jour.

Chez les patientes présentant un diabète gestationnel : au moins 4 fois par jour.

A quoi sert l'autosurveillance glycémique ⁽¹⁾ :

Chez les patients traités par insuline : cela permet d'identifier les hypoglycémies, les hyperglycémies et de corriger les doses d'insuline.

Chez les patients traités par antidiabétiques oraux : cela permet d'ajuster le traitement**, d'évaluer l'effet de l'activité physique et de l'alimentation sur la glycémie.

**Après avis du médecin.

Faut-il noter les valeurs mesurées de la glycémie ?

Il est important de noter régulièrement les valeurs mesurées dans un carnet d'autosurveillance en précisant le jour et l'heure. Des commentaires peuvent être rajoutés. Ce carnet, ainsi rempli et présenté à chaque consultation, facilitera la prise en charge du diabète par l'équipe soignante.

⁽¹⁾ Source : Fiche de bon usage Auto analyse de la glycémie
HAS octobre 2007. www.has-sante.fr

Pour toutes vos questions
www.abbott.fr

N° Vert 0800 10 11 56

Appel gratuit à partir d'un poste fixe.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant auprès d'Abbott Diabetes Care France.

 **Abbott**
Diabetes Care

LHC ADMARS08/R1